

Schuimverband

Gebruiksaanwijzing

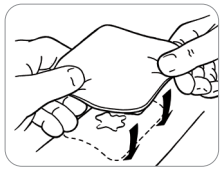

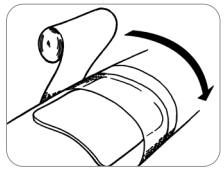

Brightwake Ltd, Lowmoor Business Park,
Kirkby-in-Ashfield, Nottingham,
NG17 7JZ,
United Kingdom

T: +44 (0) 1623 751151
www.brightwake.co.uk

EC REP CS Lifesciences Europe Limited,
The Black Church,
St Mary's Place,
Dublin 7, Dublin, D07 P4AX, Ireland
eurep@cslifesciences.com

Wondmateriaal.nl
Winterkamperweg 8
7475 SJ Markelo

info@wondmateriaal.nl
wondmateriaal.nl

CE 1639

REF	*Catalogusnummer*
LOT	*Partijcode*
	*Gebruik bij één patiënt*
	*Product is niet gemaakt van natuurlijke latex*
	*Niet gebruiken als verpakking beschadigd is*
STERILE EO	*Gesteriliseerd met ethyleenoxide*
	*Niet opnieuw steriliseren*
	*Raadpleeg de gebruiksaanwijzing*
	*Droog houden*
	*Uit direct zonlicht houden*
	*Fabrikant*
EC REP	*Bevoegd vertegenwoordiger binnen de Europese Gemeenschap / Europese Unie*
	*Distributeur*
	*Importeur*
	*Aantal*
	*Productiedatum (land van oorsprong = VK)*
	*Gebruiken voor*
MD	*Medisch apparaat*

Hydrofiel schuimverband met toplaag backing

Productbeschrijving

Een zacht, passend en niet verklevend Polyurethaan schuimverband met toplaag. Het schuimverband heeft een hoge vocht absorptie en retentie.

Indicaties

Geschikt voor acute en chronische wonden inclusief: snij- en schaafwonden, oppervlakkige brandwonden, chirurgische wonden en ulcera.

Contra-indicaties

Slagaderlijke bloedingen en hevig bloedende wonden.

Aanwijzingen voor gebruik

Plaats direct op het wondoppervlak met de roze toplaag naar boven. Daarbij moet het absorberende deel de gehele wond met 1-2cm overlappen.

Zet het vast met tape, een windsel of een wondfolie. Kan onder compressie gebruikt worden.

Frequentie van verbandwisseling

Kan tot 7 dagen in situ blijven maar moet onmiddellijk verwisseld worden als het verband verzadigd is.

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Schuimverband is een product voor eenmalig gebruik. Indien het wordt gebruikt voor meer dan één patiënt, kan kruisbesmetting of infectie optreden. Na openen van een verpakking is deze niet meer steriel. Ongebruikte verbanden moeten worden weggegooid.

Afval

Afvoeren als ziekenhuisafval.