

WONDMATERIAAL.NL

Absorberend Schuimverband Border

Gebruiksaanwijzing

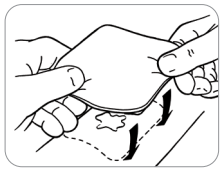

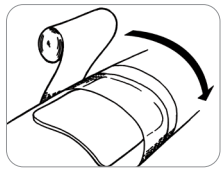

Brightwake Ltd, Lowmoor Business Park,
Kirkby-in-Ashfield, Nottingham,
NG17 7JZ,
United Kingdom

T: +44 (0) 1623 751151
www.brightwake.co.uk

EC REP CS Lifesciences Europe Limited,
The Black Church,
St Mary's Place,
Dublin 7, Dublin, D07 P4AX, Ireland
eurep@cslifesciences.com

Wondmateriaal.nl
Winterkamperweg 8
7475 SJ Markelo

info@wondmateriaal.nl
wondmateriaal.nl

CE
1639

REF	*Catalogusnummer*
LOT	*Partijcode*
	*Gebruik bij één patiënt*
	*Product is niet gemaakt van natuurlijke latex*
	*Niet gebruiken als verpakking beschadigd is*
STERILE EO	*Gesteriliseerd met ethyleenoxide*
	*Niet opnieuw steriliseren*
	*Raadpleeg de gebruiksaanwijzing*
	*Droog houden*
	*Uit direct zonlicht houden*
	*Fabrikant*
EC REP	*Bevoegd vertegenwoordiger binnen de Europese Gemeenschap / Europese Unie*
	*Distributeur*
	*Importeur*
	*Aantal*
	*Productiedatum (land van oorsprong = VK)*
	*Gebruiken voor*
MD	*Medisch apparaat*

Absorberend Schuimverband Border

Productbeschrijving

Een absorberend schuimverband met een siliconen kleeflaag en border. Het verband heeft een absorberende schuim kern welke veel vloeistof kan opnemen. De siliconen kleeflaag zal hechten aan de omliggende droge huid maar niet aan een vochtige wond.

Dit is een a-traumatisch wondverband wat betekent dat het ontworpen is om de pijn te minimaliseren van een verbandwissel.

De toplaag is ademend en voorkomt doorlekken.

Indicaties

Het schuimverband is geschikt voor gebruik bij open wonden, inclusief: Ulcus Cruris, Diabetische Voet Ulcera en decubitus, oppervlakkige brandwonden, chirurgische wonden, schaafwonden en blaren.

Contra-indicaties

Slagaderlijke bloedingen en hevig bloedende wonden. Niet gebruiken bij allergie voor siliconen.

Aanwijzingen voor gebruik

Breng het verband direct op de wond aan met de roze zijde naar boven. Zorg ervoor dat het schuimverband de gehele wond minimaal 2 cm overlapt.

Frequentie van verbandwisseling

Het schuimverband mag maximaal 7 dagen in situ blijven maar moet verwisseld worden wanneer er wondafscheiding te zien is in de schuimkern.

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Schuimverband is een product voor eenmalig gebruik. Indien het wordt gebruikt voor meer dan één patiënt, kan kruisbesmetting of infectie optreden. Na openen van de verbandverpakking is deze niet meer steriel. Ongebruikte verbanden moeten worden weggegooid.

Afval

Afvoeren als ziekenhuisafval.